

TAŞINABİLİR MESH NEBULİZATÖR

MODEL NO: HNK-MESH-01



h|nimo®

www.hunkarmedikal.com



NIMO ® Taşınabilir Mesh Nebulizatör astım, alerjiler ve diğer solunum rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.

HNK-MESH-01, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aktif mesh teknolojisi sayesinde sıvı haldeki ilaçları aerosol buğusuna dönüştürerek solunum yoluyla vücut içeresine alınmasını sağlamaktadır.

Titanyum alaşımlı aktif mesh teknolojiye sahip olan NIMO® Taşınabilir Mesh Nebülizatör hastayı rahatsız etmeden, sessiz ve hızlı şekilde ilacı hastaya verebilmektedir. Cihaz her yaştan hastanın kullanımı için uygundur.

HNK-MESH-01 kullanımı kolay, hafif ve ergonomik bir yapıya sahip olup, evde, işyerinde, seyahatlerde rahatlıkla kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.

İhtiyaç Duyduğunuz Her An Yanınızda

Yüksek
Yoğunluklu
Buhar Çıkışı

Düşük Güç
Tüketimi ve
Sessiz
Çalışma

Tam Şarj ile
60 dk
Kullanım

Şarj
Edilebilir
Li-Titanate
Batarya

USB
Kablo ile
90 Dakikada
Şarj

Hafif ve
Taşınabilir
Mini Kompakt
Tasarım

10 Dakika
İçerisinde
Otomatik
Kapanma

Kolay
Takılıp
Çıkarılabilir,
Temizlenebilir
İlaç Kabı

Minimum
ilaç kalıntısı




Yüksek Nebulizasyon Oranı İle Hızlı Biçimde Tedavi İmkânı

2.5 mikron boyutunda
2480 TANE gözeneğe sahip
mesh teknolojisi sayesinde
buharlaştırılan ilaç, akciğerlerde
en etkili olacağı kısımlara
kadar solunabilir

USB Kablo İle Şarj Özelliği

Şarj edilebilir bataryası ile priz
bağımlılığına son. Düşük güç
tüketen ve son derece sessiz
çalışabilen bu cihazın bataryasını
doldur istediğin her alanda
yanında bulundur.

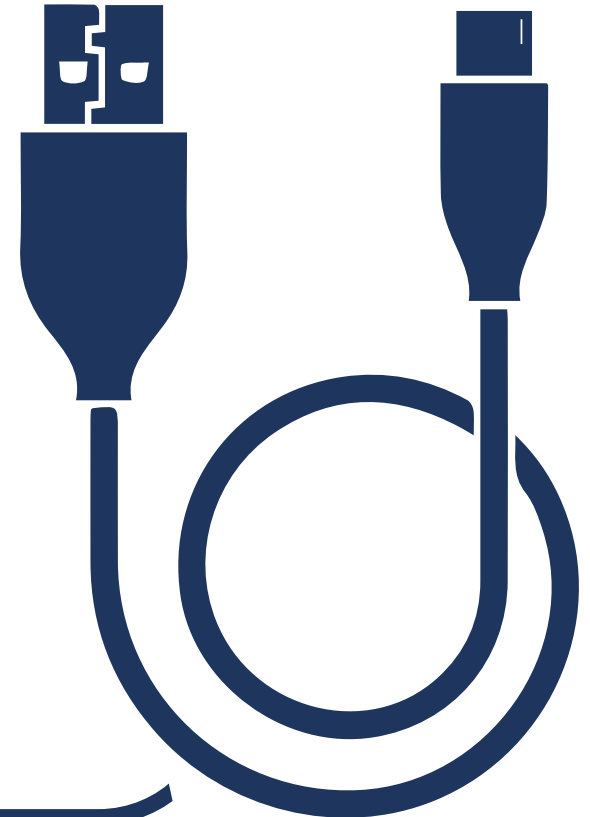



Kullanımı Kolay İlaç Kabı

Kolay takıp çıkarılabilir
tasarımının yanında kolay
temizlenebilmesi ile sizlere
rahatlık sağlayacaktır.

Zamanınız Bizim İçin Değerli

Seyahat vb. durumlarda hafif
ve taşınabilir tasarımı ile size
kullanım kolaylığı sunar.
Siz nereye. NİMO® Taşınabilir
Mesh Nebülizatör oraya



İlaç Kabi Kapağı

Titanyum
Alaşımlı Mesh

İlaç Kabi

İlaç Kabi
Çıkarma Tuşu

Cihaz Ana
Gövdesi

Açma Kapama
Düğmesi

USBŞarj
Girişi


Ağızlık

Yetişkin
ve Çocuk
Maske

Hızlı ve Verimli Tedavide

Nimo® Taşınabilir Mesh Nebülizatör

Hafif ve ergonomik yapısı, hastayı rahatsız etmeden, sessiz ve hızlı şekilde ilacı hastaya verebilmesi gibi bir çok avantajı bulunan bu cihazdan siz de kullanın rahat edin.

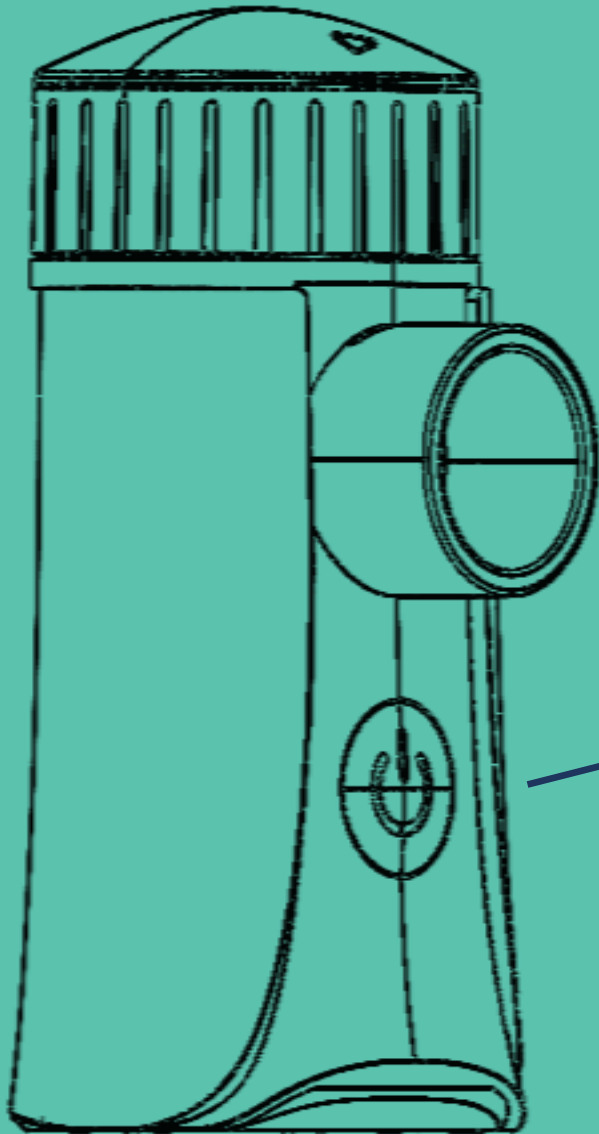

Led Işık Göstergesi



Mavi Işık:
Cihaz Çalışıyor



Mavi Işık:
Cihaz Şarj Oluyor



Işık Yok:
Cihaz Kapalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Metodu	Aktif Titreşimli Mesh Teknolojisi
Nominal Çalışma Gerilimi	DC 4.8V (dahili lityum titanat batarya) veya DC 5.0V 1A
Güç Tüketimi	<4.0 W
Nebulizasyon Hızı	0.5 ± 0.15 ml/dk
MMAD	2.5±30%µm
Titreşim Frekansı	120 kHz±10 kHz
İlaç Kabı Kapasitesi	10 ml
Tip	BF Tipi Uygulanabilir Parçalar
Katı ve Sıvı Koruma Sınıfı	IP22
Boyut	41mm(B)x45mm(E)x91mm(Y)
Ağırlık	110 gr (Batarya Dahil)



KUTU İÇERİĞİ

1 Adet NİMO Mesh Nebülizatör	1 Adet Ağızlık	1 Adet Yetişkin Maskesi	1 Adet Çocuk Maskesi
1 Adet Mikro USB Kablo	Kullanım Kılavuzu	Garanti Belgesi	1 Adet Taşıma Çantası



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Onaylı Ürün



ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ



Her şey
SAĞLIĞINIZ İÇİN!