

# OTOMATİK KOLDAN ÖLÇER DİJİTAL TANSİYON ALETİ

MODEL NO: HKD-02




nimo®

NİMO® Otomatik Koldan Ölçer Tansiyon Aleti koldaki kan basıncının damar duvarında oluşturduğu salınımı/titreşimi ölçer. Osilometrik yöntemle sitolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra nabzın çok hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlar ve klinik olarak kanıtlanmış doğruluk sunar.

Kolay kullanımı ve güvenilir tansiyon ölçüm sonuçları ile NİMO® Otomatik Koldan Ölçer Tansiyon Aleti kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.

# HKD-02 Model Otomatik Tansiyon Aleti ile Kan Basıncınızın Doğru Tansiyon Ölçümlerine Ulaşma İmkânı

- Aritmi kontrolü
- Otomatik manşon kontrolü
- Normal, obezite ve hamile bireylere uyumlu manşon tasarımı
- Çift kullanıcılı ölçüm kaydı
- 2x120 adet hafıza
- Kolay okunabilir süper büyük LCD ekran
- Tek tuşla çalışma
- Otomatik kapanma
- Harici güç adaptörü desteği
- Son yapılan 3 ölçümün ortalamasını hesaplama
- Düşük pil göstergesi

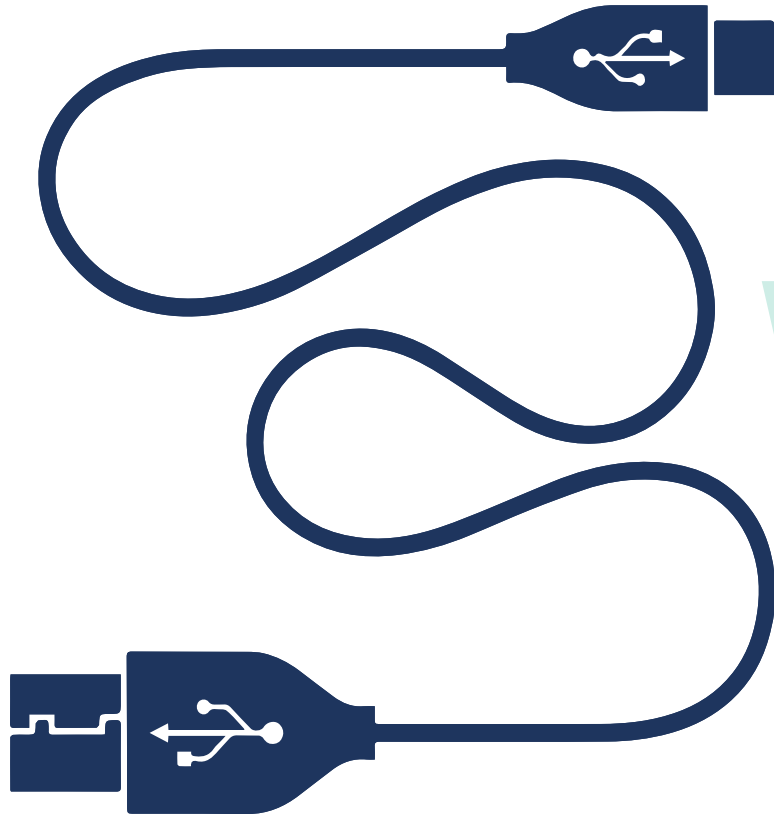


## Mikro USB kablolu şarj aleti ile çalışma özelliği


Hem pil ile kullanımı hem de mikro USB kablolu şarj aleti ile kullanımı size kolaylık sağlayacaktır. Tek bir mikro USB kablolu şarj aleti taşıyarak hem telefonunuzu şarj edin hem de NİMO® Otomatik Koldan Ölçer Tansiyon Aletini kullanın.

## Her yetişkin bireye uyumlu manşon

Kilo farkı aranmaksızın her yetişkin bireye hitap eden çok fonksiyonlu bu özel manşon size kullanım kolaylığı sağlar.

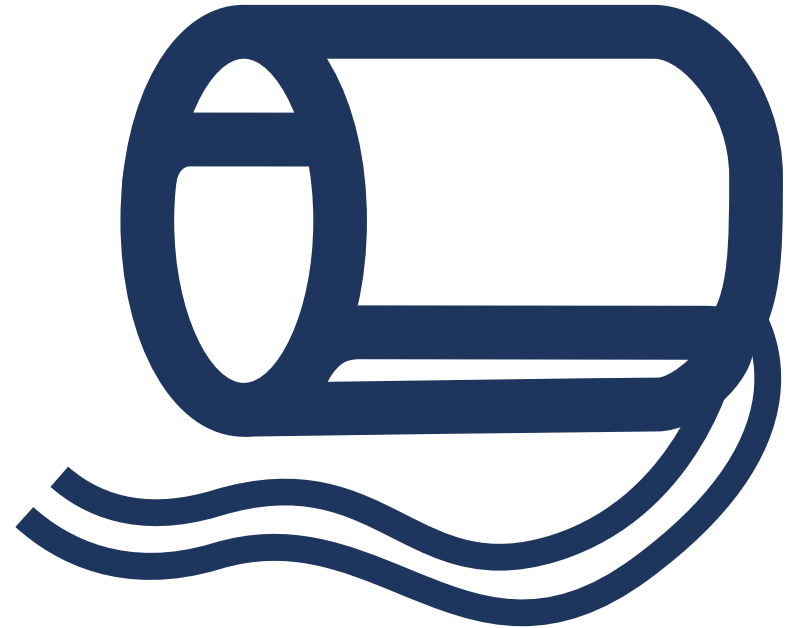


## Yüksek Kapasiteli Hafıza

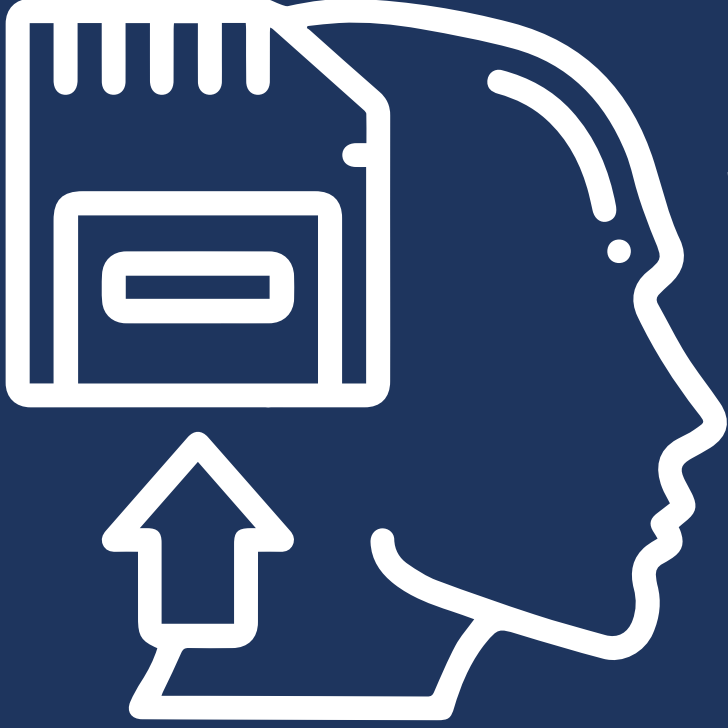

Kullanıcılardan alınan ölçümler A ve B kullanıcıları olarak farklı bölümlerde kayıt altına alınır. Her iki kullanıcının da son 120 kaydını güvenle muhafaza edip aynı zamanda son 3 ölçümünüzün ortalamasını da görüntüleyebilirsiniz.

## Kalp Ritimleriniz Kontrolünüz Altında



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Üst koldan ölçer
Ölçüm Aralığı	Diyastolik Kan Basıncı: 40-130 mmHg Sistolik Kan Basıncı : 60-230 mmHg Nabız: 40-199 atım/dk
Doğruluk	Kan Basıncı: $\pm 3$ mmHg Nabız: $\pm 5\%$
Hafıza	2x120 adet hafıza (Çift Kullanıcı)
Ortalama Alma Fonksiyonu	Son 3 ölçüm değerinin ortalamasını alma
Materyal	ABS+LCD Ekran
Manşon Boyutları	22-40 cm
Güç Kaynağı	Dahili-DC 6V (4*AAA) / Harici-DC 5V 1A
Çalışma Ortam Koşulları	Sıcaklık: 5°C ~ 40°C Nem : 15% to 93% RH. Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa
Depolama ve Taşıma Ortam Koşulları	Sıcaklık: -25°C ~ 70°C Nem: $\leq 93\%$ RH. Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa



## KUTU İÇERİĞİ

1 Adet  
HKD-02  
Tansiyon Aleti

1 Adet  
Manşon

Kullanım  
Kılavuzu ve  
Garanti Belgesi

4 Adet  
AAA Pil



Evde Bakım Cihazı



Evde Uygulanabilir Ölçüm Cihazı



*Her şey*  
**SAĞLIĞINIZ İÇİN!**



NIMO® Otomatik Koldan Ölçer Tansiyon Aleti özel manşonu, büyük LCD ekranı, ölçüm ortalaması hesaplayabilen hafızası, adaptör ile çalışma özelliği ile tamamen sizin konforunuz ön planda tutularak tasarlanmıştır. Tek tuş ile doğru ölçümler...

LCD Ekran

Ayar Düğmesi



Evrensel Mikro USB Bağlantı Noktası

Başlat/ Durdur

Hafıza Görüntüleme

Manşon Bağlantı Noktası

